


Fronto Luz Nova Medics

El fronto luz de nova medics se adopta a la tecnología de recubrimiento óptico más reciente que reduce la reflexión y mejora la claridad de la imagen. LED único con 6500lux homogéneo da una reproducción de color verdadera. El faro LED de 5 W, proporciona luz fría, brillante, uniforme y concentrada. El brillo de la luz se puede ajustar según su necesidad. El tamaño del punto se puede ajustar de 1 a 0.354 in a una distancia de trabajo de 16.535 in para un campo de visión óptimo.

La luz es perfecta para trabajos de concentración prolongados.

- Potencia de la luz LED: 5 W.
- Intensidad de luz: 6500 lux.
- Vida útil del LED: 20000 horas.
- Tamaño del punto: 0.039-0.354 in.
- Tiempo de carga: 4 horas.
- Tiempo de trabajo: ≥ 6 horas.
- Entrada: AC100-240 V/50-60 Hz.
- Brillo: ajustable.



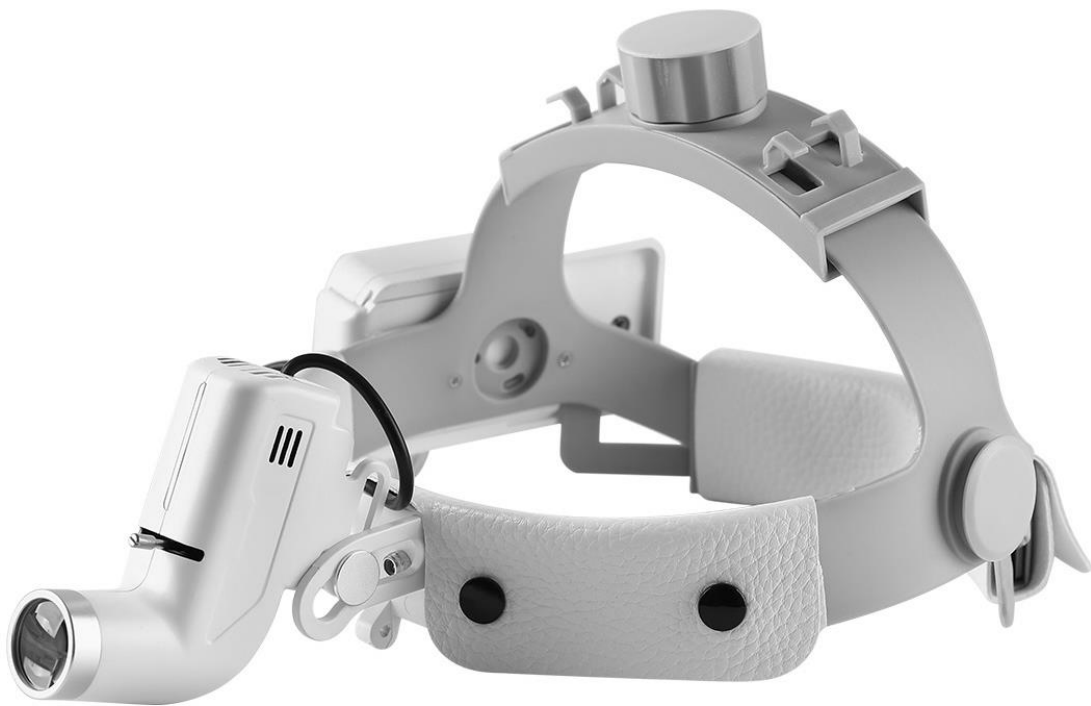

1. La luz LED y la lupa en la banda de mano son desmontables, puedes quitar cualquier parte para diferentes usos.
2. Ajusta la distancia de trabajo entre usted y el objeto observado, generalmente 11.024 in-16.535 in es la mejor distancia de vista.
3. La lupa se puede utilizar perfectamente para personas que utilizan lentes.

Ampliación: 3,5X y 2,5X

